

- Stående posisjonering
- Frontalt og dorsalt ståstativ

August 2024



ELLA STÅSTATIV

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Stående posisjonering


En oppreist posisjon er en viktig del for mange av kroppens funksjoner, og essensielt for utviklingen av kroppens egen bevegelsesfunksjon. Med støtte og posisjonering i stående posisjon fremmer vi kroppens vitale funksjoner, hjernevirksomhet, muskelaktivitet, struktur for skjelett og ledd, og reduserer risikoen for utvikling av sekundære følger som hofteluksasjon og nedsatt respirasjon.

Man kan også posisjonere i ståstativet for å påvirke neurologiske symptomer, samt oppnå sosialt samspill med andre på «øyenivå» og dermed forbedre deltakelsen og livskvaliteten til brukeren. Våre ståstativer skreddersys for å passe hvert enkelt individ, i alle aldre og stativene er justerbare slik at de vokser med brukeren.


Oppreist posisjonering i ståstativet deles gjerne inn i to forskjellige typer; frontalt og dorsalt.

Frontale ståstativ gir brukeren en mulighet til å ligge ventralt mot forskjellige avlastningspunkter for å lette belastningen på leddene i en stående posisjon.

Med andre ord plasseres brukeren på magen i ståstativet, for så å heve det opp i en stående stilling. Frontal posisjonering forutsetter at brukeren har tilfredsstillende muskel- og hodekontroll. Noen ganger brukes frontal posisjonering i ståstativ som en erstatning for en aktiv sitteposisjon, slik at brukeren får strukket hele overkroppen.

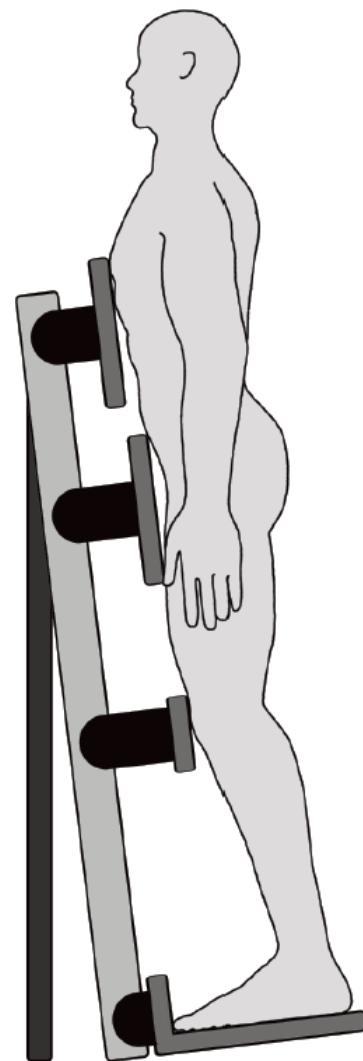

Frontal

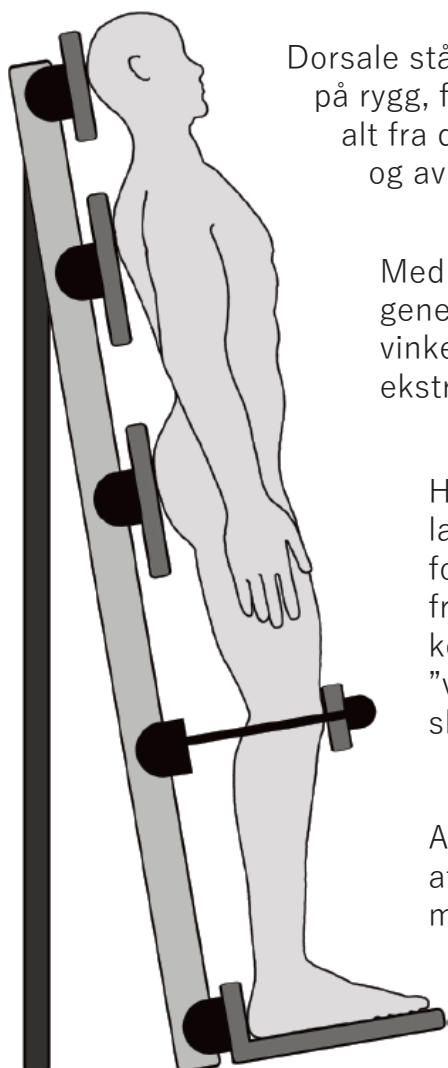

Dorsal

Dorsale ståstativer åpner da for det motsatte, hvor brukeren plasseres på rygg, før man oppnår stående posisjon. Våre ståstativer kan håndtere alt fra de enkleste, og til de mer avanserte tilfellene av posisjonering og avlastning.

Med mindre tilfredsstillende kontroll over hodet og kroppen generelt, anbefales derfor posisjonering i en dorsal posisjon, i en vinkel der hodet hviler på hodestøtten og hvor leddene til de lavere ekstremiteter utsettes for riktig press.

Hjelpemiddelspecialisten AS har gjennom årene opparbeidet lang erfaring med ståstativer, og med vårt sortiment kan vi sørge for å få alle opp i en stående posisjon, uansett alder. Fra enkel frontal og dorsal posisjonering, videre til posisjonering av kontrakturer i de nedre ekstremitetene, og posisjonering av de "vanskeligste" brukerne som også krever tilpasning for ulike skjevheter i overkroppen.

Alle våre produkter er av høy kvalitet og laget for daglig bruk, slik at vi har alle mulige tilpasningsmuligheter til å sørge for en best mulig, individuelt tilpasset «ståopplevelse».

Vi har også lang erfaring med tilpasning av ståskall. Ståskall og andre formstøpte produkter kan du lese mer om i egen produktkatalog på vår hjemmeside.

Frontalt og dorsalt ståstativ i ett produkt

Ella er et ståstativ med mange muligheter, og et fokus på enkelhet i bruk og brukervennlighet. Med 4 forskjellige størrelser betyr det at stativet vokser med bruker, og at Ella dekker et stort brukersnitt, i absolutt alle aldre.

Tanken bak Ella er enkelhet i bruk, og da overføres dette selvfølgelig også over til tilpasningen av stativet. Alle tilpasningsmuligheter kan justeres med enten håndskruer eller skruer tilpasset medfølgende verktøy (Unbrako T-nøkkel, str. 5). Det betyr at med det ene medfølgende verktøyet kan man tilpasse hele stativet i alle tenkelige måter.

Ella er bygd opp rundt en solid aluminiumsøyle, hvor man flytter og plasserer de forskjellige elementene på stativet dit det er behov. Det innebærer en høyde-, dybde- og vinkeljusterbar Whitmyer hodestøtte, en høyderegulerbar sternumplate med individuelt høyde- og breddejusterbare sidestøtter, en høyderegulerbar bekkenplate med høyde- og breddejusterbare hoftestøtter, uavhengig høyde-, dybde- og vinkeljusterbare knestøtter og uavhengig høyde-, dybde- og vinkeljusterbare fotplater.

Med tilbehør kan i tillegg bekkenplaten og/eller ryggplaten også dybde- og vinkeljusteres. Det er også inkludert brede, komfortable belter mellom sidestøtten og hoftestøttene for en trygg og sikker fiksering av bruker.

Ella er konstruert slik at stativet kan brukes både som frontalt og dorsalt ståstativ. Det betyr at man har to ståstativer i ett produkt. For å endre Ella fra et dorsalt til et frontalt stativ, fjerner man bare hodestøtten, og snur fotstøttene og bordet den andre veien. Slik kan man med enkle tilpasninger få en bruker til å gå fra dorsal til frontal ståtrening i det samme stativet.



Det fins et bredt utvalg av tilbehør som kan monteres på Ella, slik at man kan oppnå akkurat den støtten hver enkelt har behov for. For eksempel er det et bredt utvalg av forskjellige hodestøtter og to forskjellige typer knestøtter tilgjengelig i tillegg til standarden. Det er også muligheter for overarmstøtter, kjørebøyle, lår- og leggstøtte, samt et bredt utvalg av forskjellige fikseringsløsninger.


NYHET!

Ella kommer som standard med nytt trekk som gjør det lettere å tørke av flekker og smuss. Det nye trekket kan fortsatt tas av og vaskes i maskin på 30°.

Ella kommer også nå med vinkelmåler som gjør det lettere å se hvilken vinkel barnet står i. Ella elektrisk kommer nå med utsvingbare hofte- og sidestøtter som standard, som forenkler inn- og utstigning av stativet.

Ella er tilgjengelig med både manuell og elektrisk hev/senk i str. 1, 2 og 3. Str. 4 er kun tilgjengelig som elektrisk hev/senk og er ikke prisforhandlet.

Teknisk data Ella Ståstativ

	 Ella str. 1 Frontal	 Ella str. 2 Frontal	 Ella str. 3 Frontal	 Ella str. 1 Elektrisk	 Ella str. 2 Elektrisk	 Ella str. 3 Elektrisk	Ella str. 4 Elektrisk
Artikkelnr.	9310F	9320F	9330F	9310EL	9320EL	9330EL	9341EL
HMS nr.	289101	289102	289103	234695	234696	234697	234698
Brukerhøyde	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm	60-95 cm	90-130 cm	120-155 cm	130-180 cm
Maks. bredde	58 cm	58 cm	70 cm	58 cm	58 cm	70 cm	75 cm
Maks. lengde	75 cm	75 cm	100 cm	75 cm	75 cm	100 cm	110 cm
Hjuldiameter	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Snudiameter	100 cm	100 cm	135 cm	100 cm	100 cm	135 cm	145 cm
Egenvekt	28 kg	29 kg	32 kg	32 cm	35 kg	38 kg	47 kg
Maks. brukervekt	30 kg	40 kg	55 kg	30 kg	40 kg	55 kg	80 kg

 **Prisforhandlet med NAV**

Tilbehør

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
93281	234741	Bord m/balje str. 1 kpl
93282	234742	Bord m/balje str. 2 kpl
93283	234743	Bord m/balje str. 3 kpl
93161	234744	Roterbar hoftestøtte Ella str. 1
93162	234745	Roterbar hoftestøtte Ella str. 2
93163	234746	Roterbar hoftestøtte Ella str. 3
93164	234747	Roterbar hoftestøtte Ella El. str. 4
93277	234748	Roterbar ryggstøtte Ella str. 1
93278	234749	Roterbar ryggstøtte Ella str. 2
93279	234750	Roterbar ryggstøtte Ella str. 3
93280	234751	Roterbar ryggstøtte Ella El. str. 4
93076	234752	Sidestøtte Ella str. 1/Ella El. str 1 rette høyre/venstre
93122	234753	Sidestøtte Ella str. 1/Ella El. str. 1 utsvingbare smale 27mm høyre/venstre
93119	234754	Sidestøtte str 1 Ella frontalt str. 1/Ella str. 1/Ella El. str. 1 utsvingbare rette høyre/venstre
93082	234755	Sidestøtte rette høyre/venstre str. 2 Ella str. 2/Ella El. str. 2
93123	234756	Sidestøtte utsvingbare smale 27mm høyre/venstre str. 2 Ella frontalt str. 2/Ella str. 2/Ella El. str. 2
93120	234757	Sidestøtte utsvingbare rette høyre/venstre str. 2 Ella str. 2/Ella El. str. 2
93090	234758	Sidestøtte rette høyre/venstre str. 3 Ella str. 3/Ella El. str. 3/4
93121	234759	Sidestøtte utsvingbare rette høyre/venstre str. 3 Ella frontalt str. 3/Ella str. 3/Ella El. str. 3/4
93091	234760	Sidestøtte rette smale 30mm høyre/venstre str. 3 Ella El. str. 4
964-09012	234761	Sidestøtte utsvingbare buet høyre/venstre str. 1 Flexi Ella str. 1/Ella El. str. 1
964-09013	234762	Sidestøtte utsvingbare buet høyre/venstre str. 2 Flexi Ella frontalt str. 2/Ella str. 2/Ella El. str. 2
964-09014	234763	Sidestøtte utsvingbare buet høyre/venstre str. 3 Flexi Ella str. 3/Ella El. str. 3/4
77005	141494	Linx Plush 8" hodestøtte inkl. stag og feste
77006	134927	Linx Plush 10" hodestøtte inkl. stag og feste
77007	134928	Linx Plush 14" hodestøtte inkl. stag og feste
77008	139716	Linx Plush 19" hodestøtte inkl. stag og feste
77009	149192	Linx Plush 6-14" hodestøtte justerbar inkl. stag og feste
770091	157267	Linx Plush 8-18" hodestøtte justerbar inkl. stag og feste



Bord med balje til Ella



Anatomisk knestøtte

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
77012L	210409	Linx Mini hodestøtte inkl. stag og feste str. M
77013L	210410	Linx Mini hodestøtte inkl. stag og feste str. L
77011L	210408	Linx Mini hodestøtte inkl. stag og feste str. S
77016	243689	Linx HeadsUp hodestøtte inkl. stag og feste str S
77017	200061	Linx HeadsUp hodestøtte inkl. stag og feste str M
77018	201425	Linx HeadsUp hodestøtte inkl. stag og feste str L
77019	201426	Linx HeadsUp hodestøtte inkl. stag og feste str XS
3DB-XS	163841	Pelvi.Loc Basic str. XS
3DB-S	163842	Pelvi.Loc Basic str. S
3DB-M	163843	Pelvi.Loc Basic str. M
3DB-L	163844	Pelvi.Loc Basic str. L
3DAS-XS	192170	Pelvi.Loc Hoftebelte str. XS
3DAS-S	192169	Pelvi.Loc Hoftebelte str. S
3DAS-M	192168	Pelvi.Loc Hoftebelte M
3DAS-L	192167	Pelvi.Loc Hoftebelte str. L
374001	166644	Sternumstøtte Pro str. XS
374002	161711	Sternumstøtte Pro str. S
374003	167317	Sternumstøtte str. M
374004	189445	Sternumstøtte Pro str. L
374015	164011	H-sele Pro str. XS
374016	164012	H-sele Pro str. S
374017	163993	H-sele Pro str. M
374018	164013	H-sele Pro str. L



Hoftebelte/brystbelte



Reservedeler

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
CB8-230	187798	Batteri/kontrollboks Ella El. str. 1/2/3
93015	243705	Belte m/ Velcro og spenne (bryst/hofte) str. 1
93041	234743	Belte m/ Velcro og spenne (bryst/hofte) str. 2
93060	243707	Belte m/ Velcro og spenne (bryst/hofte) str. 3
93141	243699	Bord str. 1
93142	243700	Bord str. 2
93143	243701	Bord str. 3
92010	187840	Festebrakett knestøtte str. 1
92033	187841	Festebrakett knestøtte str. 2
92109	289106	Festebrakett knestøtte str. 3/4
93010	289107	Fotsandal str. 1 (par)
93037	289108	Fotsandal str. 2 (par)
93056	289109	Fotsandal str. 3 (par)
22005	243720	Gassfjær 400NM str. 1/2
22007	289110	Gassfjær 600NM str. 3
93258	243697	Hodestøttepute 10" Ella El. str. 1/2
93259	243698	Hodestøtte komplett 14" Ella El. str. 3
93074	243713	Hoftestøtte str. 1
93080	243714	Hoftestøtte str. 2
93086	243715	Hoftestøtte str. 3
HB41	243727	Håndkontroll HB41 Ella El. str. 1/2/3
93248H	289111	Knestøtte u/festebrakett str. 1 - høyre - 80 mm
93248V	289112	Knestøtte u/festebrakett str. 1 - venstre - 80 mm
93249H	289115	Knestøtte u/festebrakett str. 2 - høyre - 100 mm
93249V	289116	Knestøtte u/festebrakett str. 2 - venstre - 100 mm
93250H	289119	Knestøtte u/festebrakett str. 3 - høyre - 120 mm
93250V	289120	Knestøtte u/festebrakett str. 3 - venstre - 120 mm
CH01-EU	243726	Lader CH01 Ella El. str. 1/2/3
LA31-KIT	243722	Motorsett LA31 Ella El. str. 1/2/3 - komplett
93075	243709	Ryggstøtte str. 1
93081	243710	Ryggstøtte str. 2
93087	243711	Ryggstøtte str. 3
93122H	289150	Sidestøtte smal utsvingbar høyre str. 1
93123H	289151	Sidestøtte smal utsvingbar høyre str. 2
93124H	289152	Sidestøtte smal utsvingbar høyre str. 3
93122V	289156	Sidestøtte smal utsvingbar venstre str. 1
93123V	289157	Sidestøtte smal utsvingbar venstre str. 2
93124V	289158	Sidestøtte smal utsvingbar venstre str. 3
MW070250-TT	249334	Hodestøttestag horisontalt str. 1/2/3
93175	289161	Hodestøttestag vertikalt str. 1/2
93176	249333	Hodestøttestag vertikalt str. 3

Artikkelnr.	HMS.nr	Beskrivelse
964-1-DTX-BB-93230	289162	Trekk hodestøtte 10" str. 1 Dartex
964-2-DTX-BB-93230	289163	Trekk hodestøtte 14" str. 2/3 Dartex
964-1-DTX-BB-93238	289164	Trekk/polster str. 1 Dartex
964-2-DTX-BB-93238	289166	Trekk/polster str. 2 Dartex
964-3-DTX-BB-93238	289168	Trekk/polster str. 3 Dartex
93374	289170	Understell ståskall Ella El. str. 1 tilt
93375	289171	Understell ståskall Ella El. str. 2 tilt
93376	289172	Understell ståskall Ella El. str. 3 tilt
93371	289173	Understell ståskall Ella frontalt str. 1 tilt manuell
93372	289174	Understell ståskall Ella frontalt str. 2 tilt manuell
93373	289175	Understell ståskall Ella frontalt str. 3 tilt manuell
93329	234764	Gradeskive vinkelmåler str. 1/2/3

