

Sammenleggbart sete
15-36 kg
5-punkts belte

Mars 2024



NAVIGATOR

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

Thomashilfen NAVIGATOR

” Familier som reiser mye ønsker å være fleksible og uavhengige. Ofte oppleves en rehab bilstol som for stor og uhåndterlig, spesielt når man er på reisefot. Med den unike Navigator som et sekundært bilsete legger man til rette for aktive familier i en travel hverdag. Navigator kan slås sammen og bæres med hvor hen du måtte ønske.

Barnet sitter dermed sikkert, ikke bare i bilen, men også alle andre steder der miljøet ikke passer dem.”



HODESTØTTE
7-trinns høydejustering.
Rask og enkel å justere.

5-PUNKTS BELTE
Sikker fiksering med et 5-punkts posisjoneringsbelte. Det praktiske beltesystemet forhindrer at beltene vrir seg.

LATERALE SIDESTØTTER
Ekstra store laterale sidestøtter gir optimal støtte også for smalere barn.

BÆREHÅNDTAK
Med setet slått sammen kan det enkelt og komfortabelt bæres rundt i det integrerte bærehåndtaket.

Smart **sammenleggbar funksjon** oppfylder foreldres ønsker for oppbevaring og enkel håndtering når man er på farten.

KOPPHOLDER
Stor koppholder (kan monteres både til høyre og venstre) for å oppbevare drikke, snacks og leker lett tilgjengelig.

ABDUKSJONSKLOSS
Myk abduksjonskloss, justerbar i to posisjoner som motvirker bena fra å legge seg i kryss.

POLSTRING
Komfortabel pustende polstring som kan tas av og vaskes på 40° C.

FESTESTROPPER
Integrerte festestropper når setet skal benyttes utenom i bil.

Tilbehør Navigator



Integrert 5-punkts posisjoneringsbelte, med praktiske beltefester som motvirker tvinning.



Ekstra store laterale sidestøtter gir optimal støtte også for smalere barn.



Integrerte festestropper når setet skal benyttes utenom i bil.

Tilgjengelig i 5 forskjellige farger



GRÅ



RØD



BLÅ



GRØNN



ROSA

Myk, pustende polstring gir behagelig komfort og avlastning uten ekstra perspirering. Trekkene er avtakbare og kan vaskes i maskin på 40° C.

Eksempler på bruk i hverdagen




Kan brukes som sete nr. 2 når sete nr. 1 er for stort for bilen, eller sitter fastmontert i en annen bil.



Kan også brukes på kollektivreiser på for eksempel buss og tog.



Kan brukes som et vanlig sete på en parkbenk eller liknende.

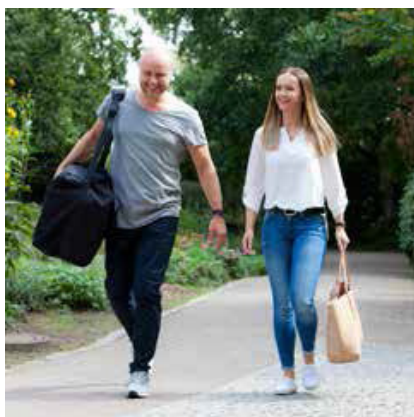

I den praktiske transportvesken bæres bilsetet komfortabelt over skulderen, og forhindrer at støv og smuss legger seg på setet.

Standard konfigurasjon:

Sete og rygg med 7-trinns høydejusterbar hodestøtte, komplett sammenleggingsmekanisme, setepute med abduksjonskloss (justerbar), ryggpute med sidepolstring, hodestøtte, ekstra hodestøtteputer (venstre/høyre), 5-punkts posisjoneringsbelte, beltefester, koppholder (venstre eller høyre), universale festestropper, avtakbart trekk (tåler maskinvask på 40° C).

Teknisk data Navigator

Setedybde	32 cm
Setebredde, foran	26 cm
Setebredde, bak	26 cm
Rygg høyde (sete)	61-71 cm
Skulderhøyde (belteføring)	37-47 cm
Sammenslåtte mål (BxHxD)	40x43x31 cm
Oppslåtte mål (BxHxD)	68x45x37 cm
Egenvekt	Ca. 5 kg
Maks brukervekt	15-36 kg



Navigator

Rückhalteeinrichtung
für spezielle
Anforderungen

Restraint system
for special needs

S

15 – 36 kg
33.1 – 79.4 lb

CE

Thomas Hilfen
GmbH & Co. Medico KG
27432 Bremervörde
Germany