

50  
YEARS

Thomashilfen

PIONEER  
SINCE 1969

Testet i henhold til  
den nye  
sikkerhetsstandarden  
R129 –  
sidekollisjons-  
beskyttelse inkludert!



opptil 50 kg /  
110.2 lbs

100 – 150 cm /  
40 – 59"

Hercules Small  
Hitting the roads today  
with tomorrow's safety in mind!

  
Thomashilfen

# THOMASHILFEN Hercules Small

Testet i henhold til  
den nye  
sikkerhetsstandarden  
R129 –  
sidekollisjons-  
beskyttelse inkludert!

"Alltid ett skritt foran når det gjelder sikkerhet"


Vi er glade for å introdusere det nye Hercules Small rehabiliteringssetet - en leder innen barnesikkerhet på reise!

Dette spesialkonstruerte rehabiliteringssetet overholder ikke bare gjeldende sikkerhetsstandarder, men er også designet for å møte fremtidige krav som trådte i kraft fra september 2023. Hercules Small, som er testet i henhold til nyeste **R129 standarden** som tar hensyn til både **front- og sidekollisjoner**, tilbyr et høyt sikkerhetsnivå og effektiv beskyttelse for barnet ditt.

Men Hercules Small er **mer enn kun et grunnleggende bilsete** – vi har utstyrt den med viktige tilleggsfunksjoner som sidekollisjonsbeskyttelse, bekken- og benføringer og hodestøtte. Hvert av disse elementene spiller en nøkkelrolle for å oppfylle de strenge sikkerhetsstandardene samtidig som de sikrer barnets komfort og støtte. Det har aldri vært en tryggere måte å sikre komfort på!

**Bilsetestandarden R129** legger spesiell vekt på økt beskyttelse ved sidekollisjonsulykker og stiller høyere krav til bilbeltesystemet og forankringen av barnesetet i kjøretøyet. Bortsett fra kollisjonssikkerhet er andre aspekter som brukervennlighet, ergonomi og bruk av materialer med lavt forurensningsnivå også utsatt for strengere tester.

## Med helt nye FUNKSJONER

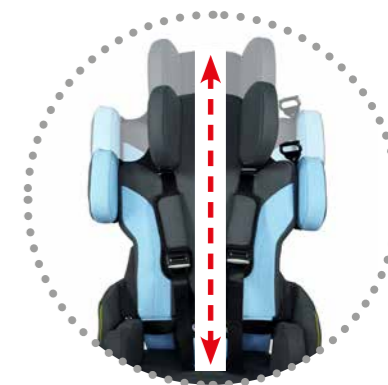

### RYGGHØYDE

Ryggstøtten kan justeres trinnløst i høyden med 25 cm, slik at den til enhver tid kan tilpasses barnets vekst. Hodet holdes i en optimal posisjon med hodestøtten. Det store utvalget av tilbehør som vokser med produktet, sørger for lang brukstid.



### BENFØRING

Smale og brede brukere med setebredde fra 29 cm til 38 cm sitter godt støttet til enhver tid. Bekken- og benføringene som vokser med brukeren er trinnløse og individuelt justerbare på hver side - også asynkron.


**For kroppsstørrelse  
100 - 150 cm**

### SIDESTØTTEBESKYTTELSE

gir spesielt god sidekollisjonsbeskyttelse - de absorberer kreftene på best mulig måte, spesielt i hode- og skulderområdet. Testet i henhold til den nye sikkerhetsstandarden R129



I over 30 år har Thomashilfen sørget for rehab bilseter for barn med spesielle behov. I dag bruker vi også kunnskapen vår til å utvikle våre egne rehab bilseter for barn og voksne. I disse bilsetene befinner all vår flerårige erfaring rundt behovene til brukerne og deres pårørende.

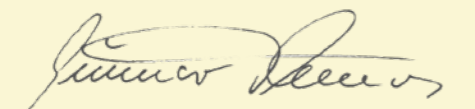  
Gunnar Thomas, Innehaver

Pioneer

REHAB CAR SEATS

since  
1988

# EN TUR GJENNOM FØRSTEKLASSEFUNKSJONER



## SIDESTØTTEBESKYTTELSE

gir spesielt god sideskollisjonsbeskyttelse - de absorberer kreftene på best mulig måte, spesielt i hode- og skulderområdet. **Testet i henhold til den nye sikkerhetsstandarden R129**



## 5-PUNKTSSELE

gir ekstra støtte og en god og sikker sittestilling under turen med de myke skulderputene - riktig beltelengde justeres raskt og enkelt med de to spennene.

## BELTESPENNE

Skulderstroppene kan klikkes individuelt inn i hurtigspennen, noe som betyr enklere fastspenning for forelder eller ledsager.



## BELTESPENNEPOLSTER

reduserer trykket fra beltespennen på det følsomme mageområdet og skjuler spennen.



## BENFØRING (VENSTRE OG HØYRE)

brukes for å støtte og posisjonere lårområdet. Disse justeres asynkront.

## SETEDYBDE

kan justeres trinnløst med 6 cm for individuell tilpasning for barnets vekst.



## HODESTØTTE

er asynkront justerbart i bredde (8,5 cm) og høyde (3 cm). Via separat tilbehør kan den også justeres i dybden, noen som gjør at stimulusoverbelastning kan forhindres.



## RYGGHØYDE

kan justeres (24 cm). Dermed tilpasser setet seg barnet og gir lang brukstid.



## TILBEHØR: RYGGVINKEL


kan justeres med ryggstøtten med to hurtighåndtak - helt uten verktøy: kun bruk de røde quick release-klemmene.

## SETEPUTE

med tykk polstring for behagelig sittekomfort uten irriterende svetting. Det pustende trekket kan tas helt av og vaskes på 40°C - uten å løsne stroppene.



Valg av to fargedesign:

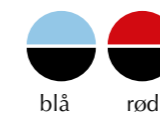

blå

rød

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



# TILPASSET SIKKERHET:

## VÅRT TILBEHØR TIL DIN HERCULES SMALL



Alle detaljer på nettsiden:  
[www.thomashilfen.com/hercules-small](http://www.thomashilfen.com/hercules-small)

### Funksjonelle baser



For å takle overføringen av barn som vokser, er roteringsplate en stor lettelse for ryggen. Utløseren er montert i frontområdet for å sikre at det utføres komfortabelt.

**TRIGGER** (Fig. under) forenkler overføringen, eventuelt kan setet snus til høyre eller venstre. Utløser for rotasjon (Fig. over)



I tilfeller med brukere med svak overkropp og hodekontroll (hypotonisk, "slapp"), er den justerbare setetilt en viktig støtte for å hindre i å tippe fremover. Barnet sitter i en avslappende hvilestilling og trenger ikke å anstrenge muskler. Den passende vinkelen kan justeres etter behov.

**TILTFUNKSJON** for setetilt i flere trinn for en avslappet hvilestilling under kjøring (0 - 10° eller med forlengelse 12,5 - 20°).

### Stabilitet for rehab bilsete



**SEATFIX** (bak setet) holder setet sikkert på plass, også når man kjører uten en bruker i setet.



**STABILISERINGSBUE** sikrer et sikkert grep om setet når det ikke er isofix i kjøretøyet.

Setet utsettes for ekstra påkjenninger, spesielt når rotasjon- og tiltfunksjonene brukes daglig. Nyttig tilbehør bør brukes for å stabilisere setet i bilen - for bedre håndtering og mer sikkerhet for bruker og ledsager.

### Sikker støtte for hode og føtter



**ANDRE BELTEFORING** (over) som et praktisk alternativ for bruk av 3-punkts sikkerhetsbelte enten til høyre eller venstre.



**HODESTØTTE EKSTRA FORLENGELSE** (side) beskytter barnet mot sensorisk overbelastning under bilturen.



**FOTSTØTTE** (nedfellbar) gjør det lettere å komme inn og ut, og hindret at setet sklir ut (høyde- og vinkeljusterbar).



**KOLLISJONSTESTET** vellykket bestått i henhold til R129.

### God sittestilling



**SIDESTØTTE** (faste) gir fast sidestøtte og støtter brystet.



**SIDESTØTTER** (svingbare) gir fast sidestøtte for brystet og letter overføringen.



**SKULDERPUTER** for å redusere bredden på skulderen.



**EKSTRA FORLENGELSE** (høyde hodeområde) gir et større område for barnet og hvile hodet mot.



**ARMSTØTTER** gir god støtte for armene.



**BORD** sørger for at barnet kan sitte oppreist og gir en ekstra sikkerhet (kan brukes med armstøtter).



**TILLEGSSPUTE HODE** gir en enda mykere kontaktflate for hodet. Fyllet er avtagbart.



**ABDUKSJONSFØRING** forbedrer benkontrollen og hindrer bena i å krysse hverandre.

### Bruker og kjøretøy trygt beskyttet



**BELTEFORING** (enkelt og alltid riktig) Intuitiv, sikker bruk av 3-punktssele. Det er ikke mulig å tre gjennom eller få knute. Krasjtestet!



**BRYSTKLIPS** stanser farlig vridning av belter og holder beltene på plass.



**PUTE FOR FUNKSJONELL BASE** sikrer maksimal støtteflate mellom kjøretøyet og den funksjonelle basen for enklere forflytning.

En fullstendig oversikt over tilbehør finner du på bestillingsskjemaet på nettsiden:  
[www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## STORT BLIR HÅNDBART



*KUN 21.7 x 9.1 x 23.6" / 55 x 23 x 60 cm*

Med bare noen få bevegelser med håndledet, foldes Hercules Small rehab bilsetet sammen slik at den tar mindre plass og er enkelt å håndtere.

Dette forenkler ikke bare monteringen i bilen, men sikrer også at setet enkelt kan transporteres og oppbevares på en plassbesparende måte selv i mindre bagasjerom (eksempelfigur: VW Polo)



**You Tube**

Se videoen:  
Så raskt og enkelt monteres  
Hercules Small i bilen.



### Dimensjoner og mål

### Hercules Small

<b>Setedybde</b>	31 - 42 cm / 12.2 - 16.5"
<b>Setebredde</b>	29 - 38 cm / 11.4 - 15"
<b>Rygg høyde</b> (innside sete)	57 - 80 cm / 22.4 - 31.5"
<b>Hode høyde</b> (sete - nedre kant av hodepute)	Rygg min: 33,5 - 36,5 cm / 13.2 - 14.4" Rygg maks: 57 - 60 cm / 22.4 - 23.6"
<b>Skulder høyde</b> (belteføring)	33 - 60 cm / 13 - 23.6"
<b>Skulder bredde</b> (med skulderføring)	26 - 36,5 cm / 10.2 - 14.4"
<b>Ryggvinkel</b> (maks.)	90° - 145°
<b>Setetilt</b> (basismodell)	0°
(med tiltbase 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
(med tiltbase 20°)	12,5° / 15° / 17,5° / 20°
<b>Nedre benlengde</b> (med fotstøtte)	16 - 42 cm / 6.3 - 16.5"
<b>Høyde laterale sidestøtter</b> (øvre kant)	28 - 34 cm / 11 - 13.4"
<b>Avstand sidestøtter</b> (maks.)	20 - 33 cm / 7.9 - 13"
<b>Maks. totale dimensjoner</b> (b x h x d)	55 x 85 x 34 cm / 21.7 x 33.5 x 13.4"
<b>Min. foldet dimensjoner</b> (b x h x d)	55 x 23 x 60 cm / 21.7 x 9.1 x 23.6"
<b>Setevekt</b> (basismodell)	11,6 kg / 25.6 lbs
Kroppsstørrelse av bruker	100 - 150 cm / 40 - 59"
Maks. brukervekt	50 kg / 110.2 lbs

### Standardfunksjoner:

Rygg med integrert høydejustering; sete med integrert setedybdejustering og setebreddejustering; kontinuerlig justering av ryggvinkel med quick release spak; pustende trekk med flammehemmende trekkstoff; hode støttepute, ryggpute, bekkenpute, benføring, setepute, skrittpute; 5-punktsbelte inkludert myke stropper; belteføring for 3-punkts bilbelte (kan brukes til høyre eller venstre); Sidekollisjonsbeskyttere; forberedte monteringsmuligheter for alt tilbehør; avtakbare trekk, maskinvaskbar opp til 40°C.

**GMFCS**  
Level  
III-V

  
**Thomashilfen**

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · 27432 Bremervörde · Germany  
Phone: +49 (0)4761 886-63 or -68 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com